

# PINNACLE SL300


Le brinda tranquilidad



## DIFERENTE DESDE EL DISEÑO

El elevador para escalera Pinnacle tiene una reputación bien establecida como líder en la industria por el diseño innovador, el rendimiento estable y la fiabilidad. El sistema impulsor patentado es el pilar fundamental que hace que este elevador para escalera sea diferente a todos los demás en el mercado.

- No necesita lubricación, así que evita el embrollo para usted, las escaleras y hasta sus mascotas.
- El sistema de baja fricción asegura un costo de propiedad reducido. No necesita mantenimiento, ni consume mucha electricidad.
- Funciona gracias a baterías con motores eficaces; por lo tanto, el rendimiento es prolongado cuando hay interrupciones en la energía eléctrica.
- El engranaje sinfín de tamaño extra grande ofrece mayor estabilidad.
- El diseño simétrico hace que tenga el ancho más compacto del sector cuando está plegado.

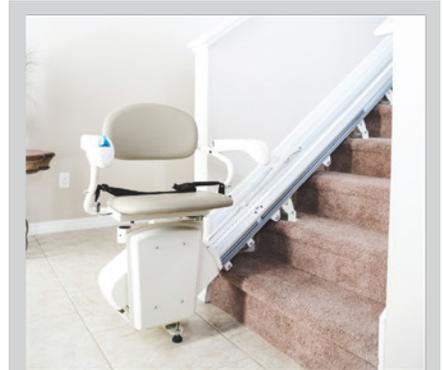

## PASO LIBRE

El riel plegable mecánico y automático exclusivo de Harmar elimina del rellano las obstrucciones y los obstáculos que pueden causar tropezos. Su funcionamiento es automático. No es necesario que el usuario se detenga ni solicite asistencia. Además, como es mecánico, no hay interruptores ni controles adicionales.

# DISEÑADO PENSANDO EN USTED

Elevador para escalera Pinnacle SL300



El interruptor de control ergonómico ayuda a quienes sufren de artritis o poca destreza en las manos.



El reposapiés amplio ofrece mayor comodidad y seguridad.



El engranaje de polímeros de nylon con accionamiento helicoidal proporciona seis puntos de contacto para lograr la máxima estabilidad.



*Mi Pinnacle me da la confianza para subir y bajar de la escalera con mayor seguridad. Funciona con fluidez y no hace ruido. Ahora me siento más cómodo e independiente en mi propia casa. Mis hijos están tranquilos porque saben que, con Pinnacle, no corro ningún riesgo.*

**+ de 40**

ciclos durante la interrupción de la energía eléctrica

**136**

kilogramos de capacidad

**CERO**

requisitos de mantenimiento

**28 cm**

de ancho plegado desde la pared

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SL300

Capacidad	300 lb (136 kg)
Velocidad	20 fpm (20 pies/min)
Ancho plegado	11 pulg (28 cm)
Sistema impulsor	Engranaje sinfín helicoidal con cremallera de polímeros de nylon
Energía	Batería con alimentación de CC de 24 V y enchufes para cargar con toma de CA estándar
Longitud del riel	16 pies (4,9 m) estándar
Características de seguridad	Sensores de obstrucción, interbloqueo de giro para el asiento de 90°, cinturón de seguridad
Garantía	2 años para las piezas, 10 años para el engranaje sinfín y la cremallera, y 1 año para las baterías
Opciones	Cinturón de seguridad retráctil, bloqueo con llave, riel adicional

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SL300FR

Riel plegable	Movimiento automático, mecánico y continuo
Ancho plegado	13 pulg (33 cm)

## COMPACTO

El armazón del Pinnacle SL300 se pliega fácilmente y ocupa solo 11 pulg (28 cm) de ancho desde la pared de la escalera, para permitir que los demás transiten. El riel está a solo 1 pulg (2,5 cm) de la pared y tiene solo 3 pulg (7,6 cm) de alto, lo que contribuye a que se mantenga fuera de vista.

